

Übersicht Schläuche und Totraum

Patient group	Patient height	PBW	Weight	Breathing circuit	Flow sensor
Neonatal	–	–	0.2–15 kg	Dual limb Neonatal/pediatric breathing circuit set	
Adult/ Pediatric	> 80 cm	> 10 kg	–	Coaxial breathing circuit set	

¹ The use of a mainstream CO2 airway adapter requires a 15-mm OD/ID adapter.

	Flow sensors	Capnostat (mainstream)
Patient group		
Dead-space volumes (functional)	1.3 ml	< 11 ml

< 1 ml	6 ml
--------	------

Corpus NEO-CO₂: 1ml

Nur – Anfeuchter HME

HME HumidStar® 2 Plus



MP05845

Neonatal

10 - 50 mL

Filter und Anfeuchter

Filter/HME TwinStar® 9 Plus



MP05820

Pädiatrie / Neonatal

30 - 150 mL

Filter/HME TwinStar® 25 Plus



MP05815

Erwachsener / Pädiatrie

100 - 500

>10 KgKG Standardschlauch



Version 08-2025

Merksatz: Neo / Kinderschlauch – Kind krabbelt / läuft mit Hilfe Standardschlauch - Kind kann alleine laufen ohne Hilfe (ca. 1.LJ / 10 KgKG)

1 Neo-Modus wählen & Expirationventil einsetzen



2 Filter am Gerät anschließen



Bei Kinderfiltern immer Geräteschutzfilter!

3 Neo - Schlauchsystem an die Filter anschliessen



4 Vorabtest starten & Set komplettieren




bis 6 kgKG




6 – 10 kgKG

Nutzung von Kapnographie im Kindersetting:

Nutzung von etCO₂ < 6KgKG nur mit Adapter möglich:

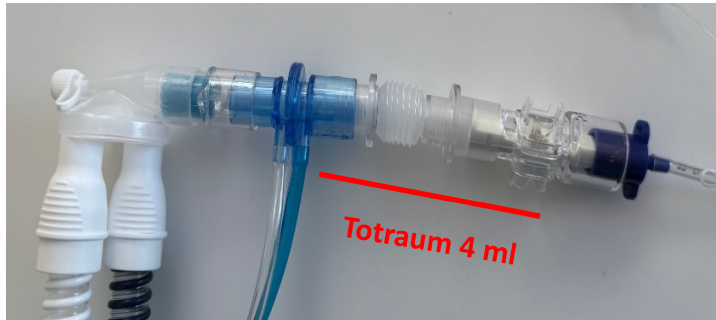

Set-Up ab 50 ml Vt mit Filter Twin Star 9

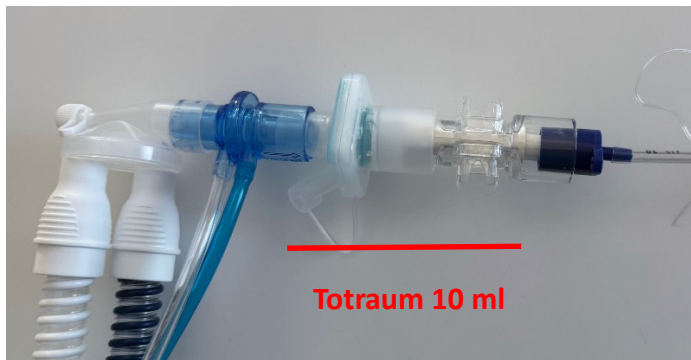

Kenne Deine Arbeitsumgebung:

- Ist die CO₂-Messung wirklich notwendig – Bedenke den Totraum – Das Tidalvolumen sollte mindestens 3x Totraum betragen!
- Bedenke: Totraumreduktion bedeutet weniger Passform
- Konnektoren haben unterschiedliche Durchmesser – beachte Bauanleitung!
- Nutze nur die vorhandenen Filter – diese entsprechen der Bauanleitung
- Totraum hat oberste Priorität! Deshalb bedenke
 - Kapnographie wirklich notwendig?
 - Wenn es ein Problem gibt – Kapno raus!
 - Weniger Komponenten = weniger Totraum